

**NEU**

**Remo-Steuerungen**

**Für Dali & Regia Pflegebetten**



*Dali &  
Regia*

# RemoBED

Assistive Bettsteuerung

Selbständig das Pflegebett verstellen



**RemoBOW**  
Großtastensteuerung



**RemoSPEAK**  
Sprachsteuerung



**RemoBIF**  
Universelles  
Bettsteuerungs-Interfaces

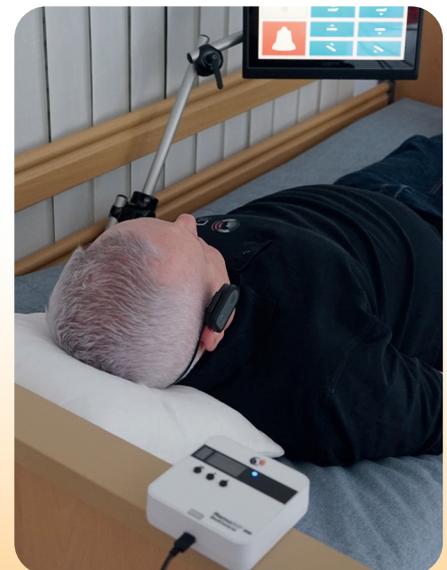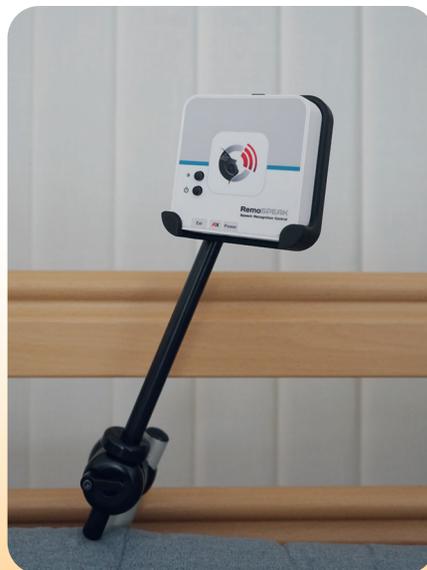

**RemoBED-Lösungen** sind MDR-konform und helfen allen, die den gewöhnlichen Handschalter nicht bedienen können.



Mehr zu RemoBED Bettsteuerungen  
[csslabs.de/remobed](https://csslabs.de/remobed)



© 2024 CSS



## RemoBOW Großtastensteuerung



Taste für Ruf und Lampe

4 Tasten für die Bettsteuerung  
(Tasten-Durchmesser 50 mm)

Mit **RemoBOW** ist es möglich, das Pflegebett mit großen Tasten (Durchmesser 50 mm) zu bedienen, die auch bei motorischen oder kognitiven Einschränkungen leicht betätigt werden können. Die Rücken- und Fußlehne ist über RemoBOW verstellbar. Ansteuerbar ist außerdem ein AssistX-Pflegerufempfänger und ein Zwischenstecker zum Schalten einer Lampe (Zubehör). RemoBOW kann direkt am Bett montiert werden.

### TECHNISCHE DATEN:

Maße: 300 mm x 65 (Breite Gehäuse, gebogen) x 30 mm (mit Tasten)  
 Montage: 2x Gewinde M4, Abstand 32 mm (1 ¼ Zoll)  
 Gewicht: 430 g / 450 g (ABL)  
 Interfaces: Easywave, Bluetooth® BLE (bei Variante ABL), AssistX-Funk  
 Stromversorgung: 5V (USB-C), typisch 20 mA, max. 500mA  
 Akkulaufzeit: ca. 4 Tage (stark nutzungsabhängig)

### ArtNr:

#20318-ABL-EU RemoBOW für Dali  
 #20318-EW-EU RemoBOW für Regia (Interface BIF8+ #20117 zusätzlich erforderlich)

### Zubehör:

#20279 Montageset für Dali (für Regia bitte anfragen)  
 #20452 AssistX Mobil Pflegeruf-Empfänger  
 #RCP20EN5001A01-K Zwischenstecker für Lampe (DE)



## RemoSPEAK Sprachsteuerung



Sprachbefehle

Mit **RemoSPEAK** ist es möglich, das Pflegebett mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. RemoSPEAK ist sprecherunabhängig und sofort einsatzbereit, die 11 Sprachbefehle müssen nicht trainiert werden. Die Rücken- und Fußlehne sowie die Betthöhe ist über RemoSPEAK verstellbar. Integrierbar ist außerdem ein AssistX-Pflegerufsystem und ein Zwischenstecker zum Schalten einer Lampe (Zubehör). RemoSPEAK kann direkt am Bett montiert werden.

### TECHNISCHE DATEN:

Maße: 101 x 101 x 32 mm  
 Gewicht: 150 g / 170 g  
 Interfaces: Ausgang NC für AssistX, Easywave, Bluetooth® BLE (bei Variante ABL)  
 Stromversorgung: 5V (USB-C), typisch 150mA  
 Backup-Akku Laufzeit: ca. 3 Std.

### ArtNr:

#20319-ABL-DE-EU RemoSPEAK für Dali (Deutsch, auch andere Sprachen verfügbar)  
 #20319-EW-DE-EU RemoSPEAK für Regia (Interface BIF8+ #20117 zusätzlich erforderlich)

### Zubehör:


#20278 Montageset für Dali (für Regia bitte anfragen)  
 #20530 AssistX Mobil Pflegeruf-Set  
 #RCP20EN5001A01-K Zwischenstecker für Lampe (DE)



## RemoBIF Universelles Bettsteuerungs- Interface



### RemoBIF BM

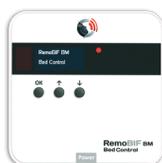

BIF8+

**RemoBIF BM (für Dali) und BIF8+ (für Regia)** sind universelle Interfaces für Infrarot oder Easywave-Funk. Das Pflegebett kann damit über ein Kommunikations- oder Umfeldsteuergerät gesteuert werden. Darüber sind z. B. mit Kopf- oder Augensteuerung die Rücken- und Fußlehne sowie die Betthöhe verstellbar.

### TECHNISCHE DATEN:

#### RemoBIF BM:

Maße: 101 x 101 x 32 mm  
 Gewicht: 155 g  
 Interfaces: Infrarot, Easywave, Bluetooth® BLE

Stromversorgung: 5V (USB-C)

#### ArtNr:

#20082 RemoBIF BM für Dali

#### Zubehör:

#20513 Wandhalterung für RemoBIF BM

#### BIF 8+

Maße: 145 x 106 x 45 mm  
 Gewicht: ca. 663 g  
 Interfaces: Infrarot (#20290)  
 Easywave (#20190)

Stromversorgung: 12 V Netzteil

#### ArtNr:

#20290 BUSSYSTEM BIF8+ für Regia (Infrarot)  
 #20117 BUSSYSTEM BIF8+ für Regia (Easywave)