

NEU

Remo-Steuerungen

Für Dali & Regia Pflegebetten



*Dali &
Regia*

RemoBED

Assistive Bettsteuerung

Selbständig das Pflegebett verstellen



RemoBOW
Großtastensteuerung



RemoSPEAK
Sprachsteuerung



RemoBIF
Universelles
Bettsteuerungs-Interfaces

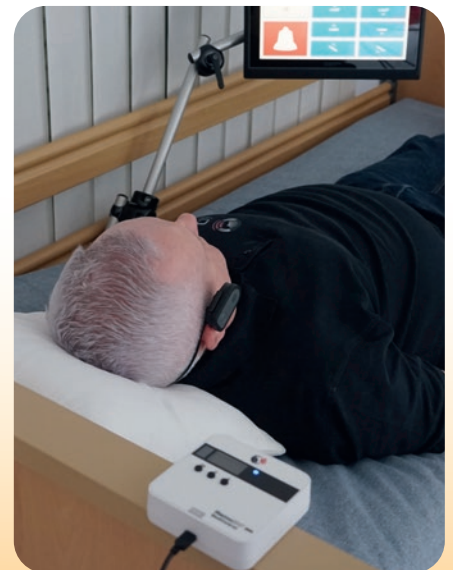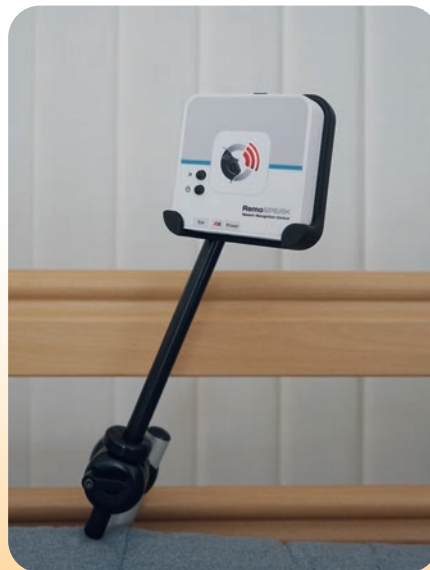

RemoBED-Lösungen sind MDR-konform und helfen allen, die den gewöhnlichen Handschalter nicht bedienen können.



Mehr zu RemoBED Bettsteuerungen
csslabs.de/remobed



© 2024 CSS



RemoBOW Großtastensteuerung



Taste für Ruf und Lampe

4 Tasten für die Bettsteuerung
(Tasten-Durchmesser 50 mm)

Mit **RemoBOW** ist es möglich, das Pflegebett mit großen Tasten (Durchmesser 50 mm) zu bedienen, die auch bei motorischen oder kognitiven Einschränkungen leicht betätigt werden können. Die Rücken- und Fußlehne ist über RemoBOW verstellbar. Ansteuerbar ist außerdem ein AssistX-Pflegerufempfänger und ein Zwischenstecker zum Schalten einer Lampe (Zubehör). RemoBOW kann direkt am Bett montiert werden.

TECHNISCHE DATEN:

Maße:	300 mm x 65 (Breite Gehäuse, gebogen) x 30 mm (mit Tasten)
Montage:	2x Gewinde M4, Abstand 32 mm (1 ¼ Zoll)
Gewicht:	430 g / 450 g (ABL)
Interfaces:	Easywave, Bluetooth® BLE (bei Variante ABL), AssistX-Funk
Stromversorgung:	5V (USB-C), typisch 20 mA, max. 500mA
Akkulaufzeit:	ca. 4 Tage (stark nutzungsabhängig)
ArtNr:	
#20318-ABL-EU	RemoBOW für Dali
#20318-EW-EU	RemoBOW für Regia (Interface BIF8+ #20117 zusätzlich erforderlich)
Zubehör:	
#20278	Montageset für Dali (für Regia bitte anfragen)
#20452	AssistX Mobil Pflegeruf-Empfänger
#RCP20EN5001A01-K	Zwischenstecker für Lampe (DE)



RemoSPEAK Sprachsteuerung



Sprachbefehle

Mit **RemoSPEAK** ist es möglich, das Pflegebett mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. RemoSPEAK ist sprecherunabhängig und sofort einsatzbereit, die 11 Sprachbefehle müssen nicht trainiert werden. Die Rücken- und Fußlehne sowie die Betthöhe ist über RemoSPEAK verstellbar. Integrierbar ist außerdem ein AssistX-Pflegerufsystem und ein Zwischenstecker zum Schalten einer Lampe (Zubehör). RemoSPEAK kann direkt am Bett montiert werden.

TECHNISCHE DATEN:

Maße:	101 x 101 x 32 mm
Gewicht:	150 g / 170 g
Interfaces:	Ausgang NC für AssistX, Easywave, Bluetooth® BLE (bei Variante ABL)
Stromversorgung:	5V (USB-C), typisch 150mA
Backup-Akku Laufzeit:	ca. 3 Std.
ArtNr:	
#20319-ABL-DE-EU	RemoSPEAK für Dali (Deutsch, auch andere Sprachen verfügbar)
#20319-EW-DE-EU	RemoSPEAK für Regia (Interface BIF8+ #20117 zusätzlich erforderlich)
Zubehör:	
#20279	Montageset für Dali (für Regia bitte anfragen)
#20530	AssistX Mobil Pflegeruf-Set
#RCP20EN5001A01-K	Zwischenstecker für Lampe (DE)



RemoBIF Universelles Bettsteuerungs- Interface



RemoBIF BM (für Dali) und BIF8+ (für Regia) sind universelle Interfaces für Infrarot oder Easywave-Funk. Das Pflegebett kann damit über ein Kommunikations- oder Umfeldsteuergerät gesteuert werden. Darüber sind z. B. mit Kopf- oder Augensteuerung die Rücken- und Fußlehne sowie die Betthöhe verstellbar.

TECHNISCHE DATEN:

RemoBIF BM:	BIF 8+
Maße:	Maße:
101 x 101 x 32 mm	145 x 106 x 45 mm
Gewicht:	Gewicht:
155 g	ca. 663 g
Interfaces:	Interfaces:
Infrarot, Easywave, Bluetooth® BLE	Infrarot (#20290) Easywave (#20190)
Stromversorgung: 5V (USB-C)	Stromversorgung: 12 V Netzteil
ArtNr:	ArtNr:
#20082 RemoBIF BM für Dali	#20290 BUSSYSTEM BIF8+ für Regia (Infrarot) #20117 BUSSYSTEM BIF8+ für Regia (Easywave)
Zubehör:	
#20513 Wandhalterung für RemoBIF BM	